

Intelligent Face Mask

Quick Start Guide


Warning

This respirator helps protect against particulate contaminants but does not eliminate exposure to or the risk of contracting any disease or infection. Misuse may result in sickness or death. For proper usage refer to user instructions.

Disclaimer


JSB Tech Pte Ltd. does not assume any liability arising out of the application or use of any product; neither does it convey any license under its patent rights of others. In no event shall JSB Tech Pte Ltd. be liable for any direct, indirect, punitive, incidental, special consequential damages, to property or life, whatsoever arising out of or connected with the use or misuse of the product. Use the product by a user is the user's risk.

1. Rubber padding
2. Translucent face mask
3. Speaker module
4. Filter cap
5. Filters
6. Exhaust valve
7. Pump inlet cover

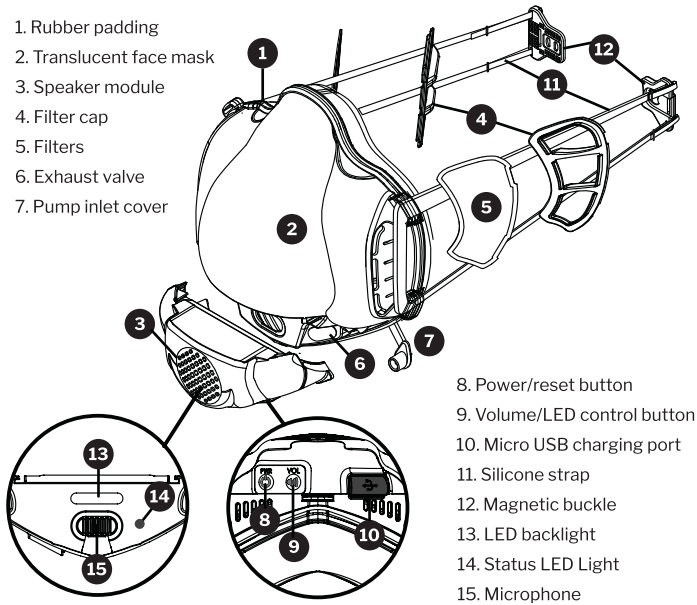

How to setup & pair your smartphone:

Note: You will need to download "eGee-Pro Intelligent mask App" from Apple App store & Google Play.

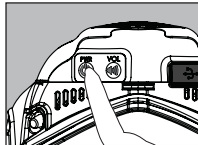

Power on the mask by Press the "Power Button" located at the bottom speaker module.



The blue LED Backlight flashing, indicating is in **pairing mode**.

Tap on "Connect to Mask" button to begin the pairing.

JQC-6-09845-95-02

NOTICE



For better **COMFORT** and best **FITTING** on facial contour, please allow few days of wearing the mask to let the rubber padding and silicon straps soften.

Volume control

Users can adjust mask speaker volume up to 3 Levels, to change volume user press the volume button, each press will accompany by a 'short beeping' notification, with 3 beeps for max volume setting & further press will cycle back to level 1.

LED control

To turn LED light on/off just Press & Hold the 'Volume' button for 2 seconds.

Module Reset

To reset the module, just press & hold the 'Power' button for 4 seconds and release. The module will reboot automatically

NOTE:

User also can control the mask volume and LED colour through **eGee-Pro intelligent mask app**, available in Apple App store & Google Play. Scan QR below to download:



Using external USB to Charge the speaker module

Battery for speaker module can last over 3 hours* continuous usage after a full charge. Battery low notifications will appear in your mobile app or status LED will flashes in twice in green on the speaker module.


Use any standard external USB power source (e.g. a portable USB power bank) to power up & charge. When fully charged, the LED light will turns GREEN.

NOTE: * Battery life will vary depend on the volume setting & LED

How to remove / Install speaker module

To remove



Use both thumb press the microphone outwards from the face mask main body.

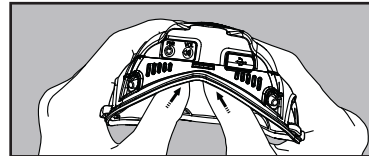

To install

A) Align the module with the guide rail shown in the illustration and push toward the face mask until the user feels/heard a click.


B) Use both thumbs to hold the mask body in place and use index fingers and middle fingers to press the module towards the mask body untill hear/feel the click.

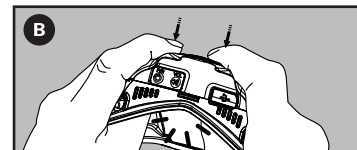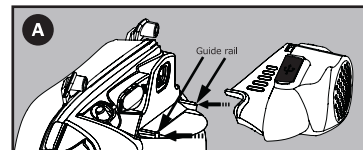

How to prevent fogging

⚠ IMPORTANT:

Before washing & sanitizing the mask, remove all refill filters from the mask

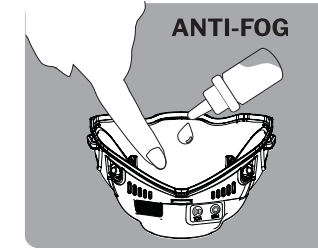

- 1 Spray or wipe the soapy water on face mask and gently pat or rub dry using soft fabric.
- 2 Use a tiny drop of anti fog, or baby oil, or facial soap/gel, then spread evenly on the mask's inner surface using your index finger.

How to sanitize eGee-Pro Mask



CAUTION

The speaker module is not waterproof. When cleaning & sanitizing the mask, the speaker module must be detached from the mask.

Sanitizing Mask



Using soap/detergent sanitizing

Wash your mask in clean warm (around 30°C) soapy water, making sure your rinse all components thoroughly before allowing them to dry naturally

Sanitizing speaker module





UV light sanitizing

Place the module into UV light range for 15 Min, flip the mask to the front position and let it expose to UV light for another 15 minutes to sanitize.

Replacing filter

⚠ IMPORTANT:

- Properly wash & disinfect your hands before handling the facemask
- eGee-Pro antiviral refill filter service life is recommended for daily single usage and is limited by considerations on hygiene, damage to the mask, and increase in breathing resistance.

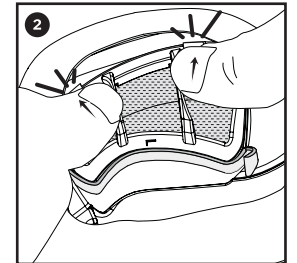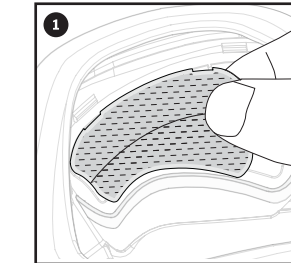

1. Place the filter into filter gutter.
2. Close filter cap, push forward & press down untill you hear the clip sound.

eGee-Pro® インテリジェントマイク付マスク

高性能フィルター(N95グレード)・スピーカーモジュール付

ユーザーマニュアル

※使用する前に、必ずこのユーザーマニュアルをよく読んでからマスクを使用してください。


【注意】

本品は、粒子状汚染物質の吸入を防止するためのものですが、あらゆる疾患や感染症の暴露や感染のリスクを排除するものではありません。誤った使用は深刻なケースを招く恐れがあります。適切な使用方法については、装着の手順を参照してください。

また、本品は有毒な粉塵や液体粒子、有毒ガス、蒸気等が発生する環境及び、酸素濃度が19.5%未満の場所では使用できません。


【免責事項】

JSB Tech Pte. Ltd.は、製品の使用に起因するいかなる責任も、第三者へのライセンスの権利を移行する責任も負いません。いかなる場合でも、JSB Tech Pte Ltd.は、ユーザーが当製品を使用または誤用したことによる財産または生命に対して、直接的、間接的、偶発的な結果生じた損害に対してはユーザーのリスクとなります。当社は責任を負いません。

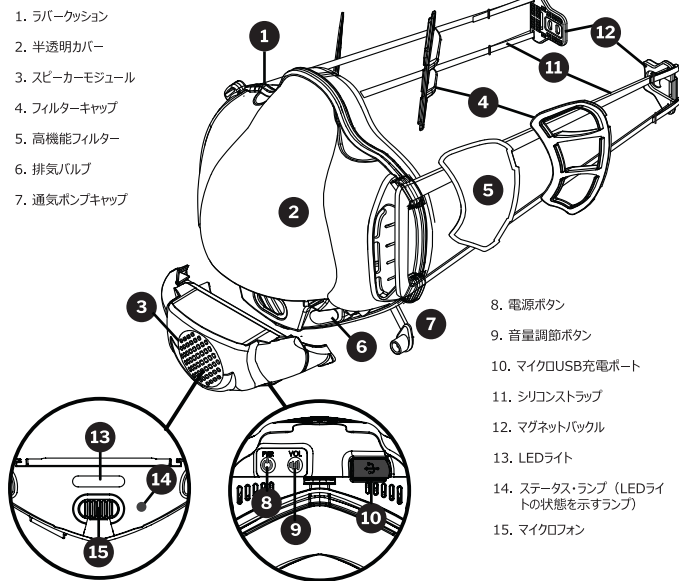

【スマートフォンの初期設定とマイクとのペアリング方法】

注) お使いになる前に、Apple App storeもしくはGoogle Playからスマートフォンアプリ「eGee-Pro intelligent mask App」をダウンロードする必要があります。
本ユーザーマニュアル内のQRコードからダウンロードいただけます。

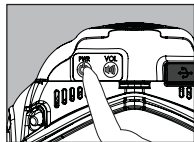

スピーカーモジュール下部にある「電源ボタン」を押して、マスクの電源を入れます。青色が点滅したらペアリングモードであるサインです。



「接続 (Connection to Mask)」ボタンをタップしてペアリングを開始します。

注



シリコンクッションとシリコンストラップは初回の着用時はやや硬めに感じる場合がありますが、繰り返し着用することで徐々に馴染んでいきます。

【音量調整】

3段階の音量設定ができます。音量調節ボタンを押すとピー音が鳴り、音量が大きくなります。3段階目のレベルの後は最少音量にセットされます。

【LEDライト調整】

LEDライトをオン/オフするには、音量調節ボタンを2秒間押したままにします。

※ モジュール本体での操作の他に、eGee-Pro intelligent mask appアプリを利用して音量とLEDライトを調整することができます。ダウンロードするには、以下のQRをスキャンします。

マイクロフォンモジュールのリセット

「電源」ボタンを4秒間押し続けるとリセットでき、モジュールが再起動します



【外部USBを使用してスピーカーモジュールを充電する】

スピーカーモジュールに内蔵されているバッテリーは、フル充電後に3時間以上*継続して使用することができます。

バッテリーの残量は、モバイルアプリに表示されます。また、モジュール下部のLEDライトの状態を示すランプが赤く点滅し、ピー音が鳴ります (このピー音はマイクロフンの電源をオフにすると鳴り止みます)。


充電するには、標準の外部USB電源 (ポータブルUSB電源/バンクなど) を使用します。充電が完了すると、モジュール下部のLEDライトの状態を示すランプが緑色に点灯します。

注) バッテリーの持続時間は、音量とLEDライトの設定により異なります。

【スピーカーモジュールの取外し/取付け方法】



取外し方法

両手の親指でマスク内側下部の凸部からスピーカーモジュールを外側に押して取り外します。(図はマスクを逆さにした状態です)

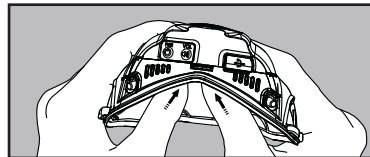


取付け方法

- A) 図に示すガイドレールにモジュールをスライドさせます (図はマスク本体を逆さにした状態です)。
B) 両方の親指でモジュールをおさえ、人差し指と中指でマスク本体を支えながらカチッと音がするまで押し込みます。

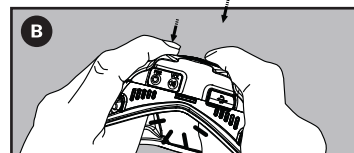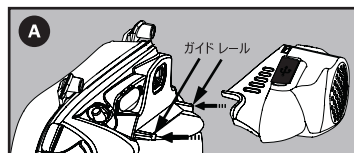

【マスクカバー 曇り止めについて】

注) 清潔な指で行ってください。

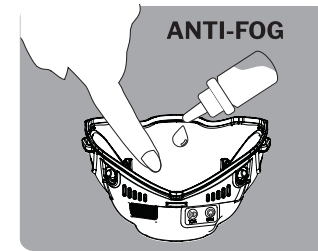

- A. カバー内側に石鹸水を付ける、またはスプレーした後、柔らかい生地を使用して拭き取った後に、乾かします。
B. 市販の曇り止め、ベビーオイル、またはフェイスソープを指でマスクの内面に均等に広げます。

【eGee-Proマスク本体の洗浄消毒について】



スピーカーモジュールは防水加工されておりません。必ずマスク本体から取り外してから洗浄してください。



マスク本体を中性洗剤・石鹼で洗浄する

マスクを中性洗剤もしくは石鹼で洗ってから30℃の水できれいに洗い流し、自然乾燥させます。

【eGee-Proスピーカーモジュールの消毒について】





スピーカーモジュールをUV消毒する

モジュール正面をUVボックスで15分間、さらに反転させて15分間、UV消毒します。

【高性能フィルターの交換 (2枚)】

注:

- マスクフィルターを交換する際は手を洗い、清潔な手で交換して下さい。
- eGee-Pro抗菌交換用フィルターは毎日交換することでフィルターのパフォーマンスを維持することができます。但し、使用する環境 (衛生状態)、呼吸の状況によって、交換頻度を増やすことをお勧めします。

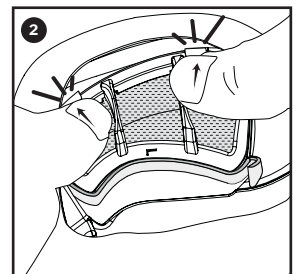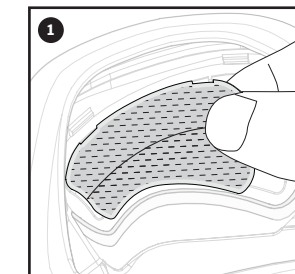

- 内側サイドの交換用フィルターカバーを取り外し、フィルターを溝にはめます。
- フィルターカバーをかぶせて前方に押してカチッと音がしたらセット完了です。