




Adjust mask to fit your face contour

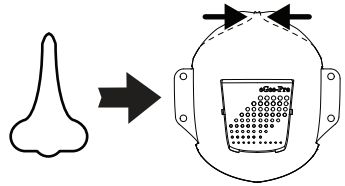


Pinching down on top portion of face mask to decrease the nose bridge width.

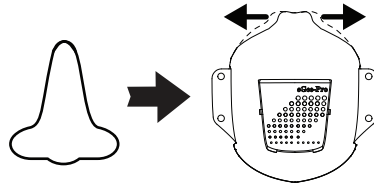

Press down on top portion of face mask to increase the nose bridge width.

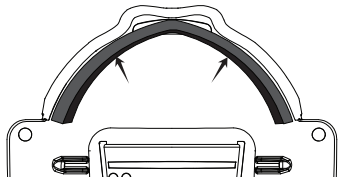


Stick the top sponge at nose piece to prevent air leak from above nose area.

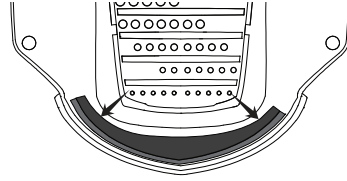

(Optional) you can stick the sponge on the bottom of the mask as indicated in the picture above to prevent air leak.

How to change filter

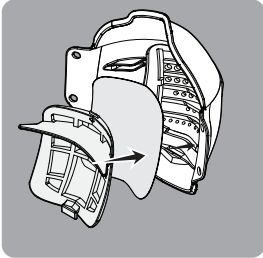

- 1 Pull out filter compartment cap & insert filter cartridge with blue side facing outward from user's face.
- 2 Close back the filter compartment cap by inserting the bottom first and push towards until you hear a click.

CAUTION:

- 1 eGee-Pro antibacterial refill filter service life is recommended for daily single usage and is limited by considerations on hygiene, damage to the mask, and increase in breathing resistance.
- 2 Ensure your hands are clean before holding filter cartridge.
- 3 Sanitize the reusable face mask before use.

How to sanitize eGee-Pro Mask



- 1 Wash the plastic facemask with running water.
- 2 Boil the plastic facemask in water for 5 minutes to sanitize.

WARNING:

- 1 Filter cartridges are NOT for reuse. Remove the used filter and replace it with a new filter.
- 2 Not suitable for children use.

JSB TECH PTE LTD

100 Pasir Panjang Road, 100 Pasir Panjang
#06-02 Singapore 118518
Email: info@jsbtech.com




FDA approved plastic material
BPA (EC) No. 1895/2005


JIM-6-09501-95-01

Printed in Indonesia


Mengatur masker agar sesuai kontur wajah

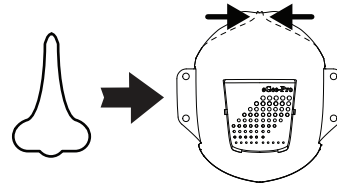


Jepit porsi atas masker seperti gambaran di atas untuk mengecilkan lebarnya hidung masker.

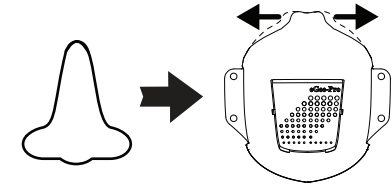

Tarik masker kearah seperti gambar di atas untuk melebarkan hidung masker.

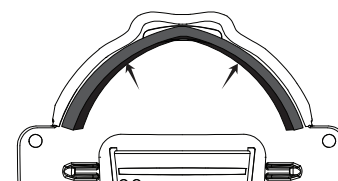


Tempelkan busa yang disediakan untuk mencegah udara keluar dari atas masker.

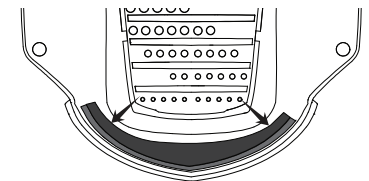

(Opsional) anda bisa menempelkan 2 stiker di bagian bawah masker seperti gambaran diatas untuk mencegah udara keluar dari bagian bawah.

Cara mengganti filter

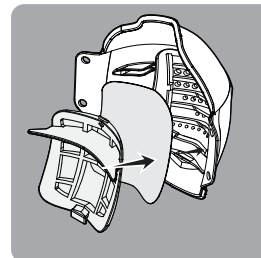

- 1 Lepaskan penutup filter dan masukkan filter isi ulang dengan bagian kain biru menghadap ke arah luar dari wajah memakai masker.
- 2 Tutup kembali penutup filter dengan cara memasukkan bagian bawah dulu dan tekan ke depan sampai Anda mendengar suara klik.

CAUTION:

- 1 eGee-Pro filter antibakteri direkomendasikan untuk pemakaian sekali/hari dan tergantung kebersihan pengguna, kerusakan pada masker dan resistensi pernapasan.
- 2 Pastikan tangan Anda bersih sebelum melakukan/mengganti filter isi ulang.
- 3 Disinfeksi masker sebelum digunakan.

Cara mendisinfeksi Masker eGee-Pro



- 1 Lakukan pencucian masker plastik dengan menggunakan air yang bersih.
- 2 Masukkan masker plastik ke dalam air mendidih selama 5 menit.

PERINGATAN:

- 1 Filter lama TIDAK untuk digunakan kembali. Gantikan dengan Filter yang baru.
- 2 Tidak cocok untuk digunakan oleh anak-anak.

JSB TECH PTE LTD


100 Pasir Panjang Road, 100 Pasir Panjang
#06-02 Singapore 118518
Email: info@jsbtech.com




FDA approved plastic material
BPA (EC) No. 1895/2005

Printed in Indonesia


调整面罩以适用您的面部轮廓

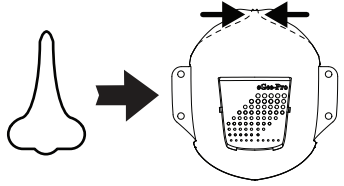


捏紧面罩顶部来减少鼻梁处的空间。

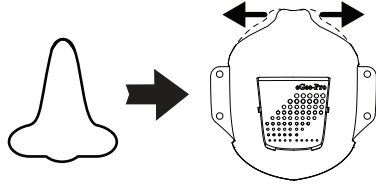

向下按压面罩顶部来增加鼻梁处的空间。

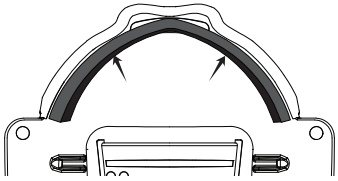


将顶部海绵粘在鼻梁上，以防止空气从鼻子区域泄漏。

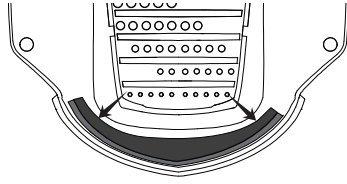

(可选) 您可以按照上图指示将海绵粘在面罩底部，以防止漏气。

如何更换过滤器

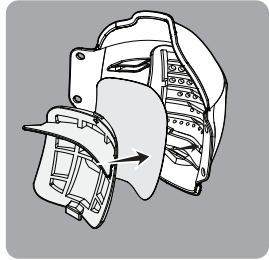

- 1 打开过滤器盖，将过滤器滤芯蓝色面朝下插入。
- 2 盖上过滤器盖时，先插入底部，然后向前推直至听到咯哒一声。

⚠ 注意：

- 1 eGeePro抗菌过滤滤芯的使用寿命建议为每日单次使用，并受到卫生，口罩损坏和呼吸阻力增加等因素的限制。
- 2 固定滤芯时请确保双手干净。
- 3 使用前请消毒可重复使用的面罩。

如何消毒eGee-Pro面罩



- 1 使用自来水冲洗塑料面罩。
- 2 将可重复使用的塑料面罩放入水中煮沸5分钟进行消毒。

⚠ 警示：

- 1 滤芯不可重复使用，请卸下用过的滤芯，更换新的滤芯。
- 2 不适合儿童使用。

JSB TECH PTE LTD


100 Pasir Panjang Road, 100 Pasir Panjang
#06-02 Singapore 118518
Email: info@jsbtech.com




FDA approved plastic material
BPA (EC) No. 1895/2005

Printed in Indonesia


顔の輪郭に合わせたマスクの調整の仕方

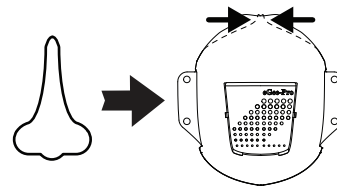


マスクの上部は、隙間ができないように幅の調整をすることができます。狭くする場合は二本の指で狭めます。

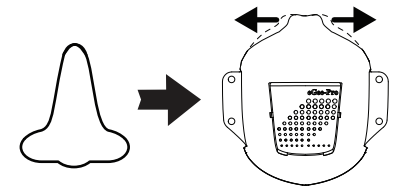

広げる場合は、外側に広げて調整することができます。

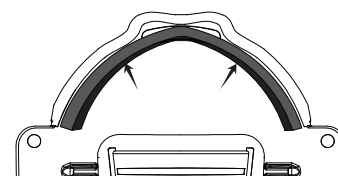


鼻にあたる部分に隙間ができないように、上側のスポンジを貼ります。

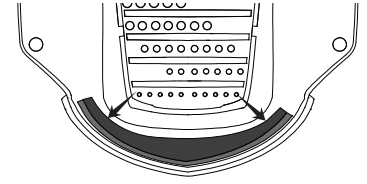

(オプション) 上図のように、マスクと顔にあたる部分に隙間ができないようにスポンジを貼ります。

フィルター交換について

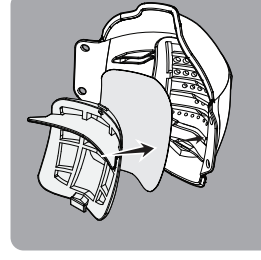


- 1 鼻と口に接する内側のカバーのキャップを取り外し、青い面を手前にしてフィルターをフィットさせます。
- 2 フィルターの上からカバーをします。まず下側から取り付け、カチッ音がするまで押します。

⚠ 注意事項：

- 1 eGee-Pro抗菌フィルターは、1日1枚の使用が目安ですが、使用する環境の衛生面、ユーザーの呼吸状態によって交換頻度を増やすことをお勧めします。
- 2 フィルターセットの際は、清潔な手で行って下さい。
- 3 フェイスマスクは煮沸消毒してからご使用下さい。

eGee-Proマスクの洗い方・煮沸消毒

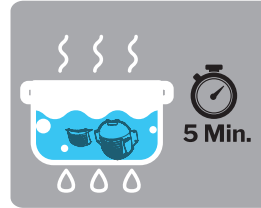

- 1 プラスティックフェイスマスクを水で洗います。
- 2 沸騰したお湯でマスクを5分間、煮沸消毒します。

⚠ 注意事項:

- 1 フィルターは再利用できません。一度使用したら新しいフィルターに取り換えて下さい。
- 2 このマスクは幼児向きではありません。

JSB TECH PTE LTD

100 Pasir Panjang Road, 100 Pasir Panjang
#06-02 Singapore 118518
Email: info@jsbtech.com



FDA approved plastic material
BPA (EC) No. 1895/2005

Printed in Indonesia